

Installationsanleitung - Update Dezentral

Mithilfe dieser Anleitung können Sie ganz einfach ein Update von MediFox ambulant eigenständig installieren. Probieren Sie es gern aus!

i Bitte beachten Sie, dass die in dieser Anleitung dargestellten Versionsnummern von Ihren Versionsnummern abweichen können.

Wichtig:

1. Synchronisieren Sie bitte **vor** und **nach** jedem Update alle Mobilgeräte um Datenverluste zu vermeiden. Prüfen Sie im Anschluss, ob Updates für die Mobilgeräte zur Verfügung stehen und installieren Sie diese.
2. Erstellen Sie vor dem Update bitte unbedingt eine Datensicherung, da MediFox für Datenverluste, die aus einer fehlenden Datensicherung resultieren, nicht haftet.

Für den gesamten Updateprozess benötigen Sie Administratorberechtigungen.

Video - Installationsanleitung - Update Dezentral


Verwandte Artikel

- [Installationsanleitung - Update Dezentral](#)
- [Automatische Updates über die Versionsverwaltung einstellen](#)
- [Installationsanleitung - Update Zentral](#)
- [Installation CareMobile](#)
- [Installation Doku-CarePad](#)
- [Installation Management-CarePad](#)
- [Systemchecklisten MediFox ambulant](#)
- [Benachrichtigungen über die Versionsverwaltung einstellen](#)
- [Installation von dakota.le](#)
- [Installationsanleitung - Arbeitsplatz](#)

Lösungsweg


Update Dezentral

1. Starten Sie die "MediFox Versionsverwaltung" aus dem Startmenü Ihres Servers. Sie können hierfür gern die Suchfunktion im Startmenü verwenden.

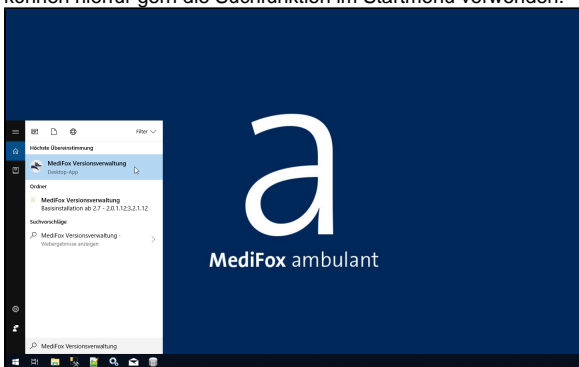


Versionsverwaltung starten

2. Nach dem Start der Versionsverwaltung wird nach Updates für die Versionsverwaltung und dem Lizenzdienst gesucht. Die Aktualisierung dieser Komponenten wird vor einem Update von MediFox ambulant vorgenommen. Klicken Sie hierzu bitte auf die Schaltfläche „Download“, um die Komponenten herunterzuladen. Nachdem der Download abgeschlossen ist, können Sie die Komponenten aktualisieren und die Versionsverwaltung starten. Sollte diese Maske bei Ihnen nicht angezeigt werden, können Sie gern direkt mit dem nächsten Schritt fortfahren.

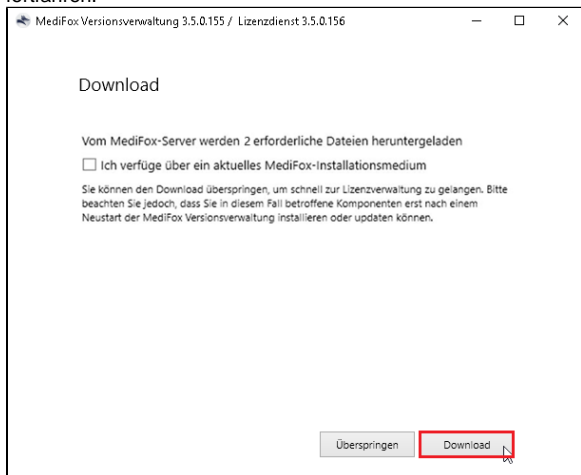


Update Lizenzdienst/Versionsverwaltung

3. Sie sehen jetzt die Startseite der Versionsverwaltung. Sie gelangen mit einem Klick auf "Installation/Update" in die Übersicht aller installierten Komponenten.

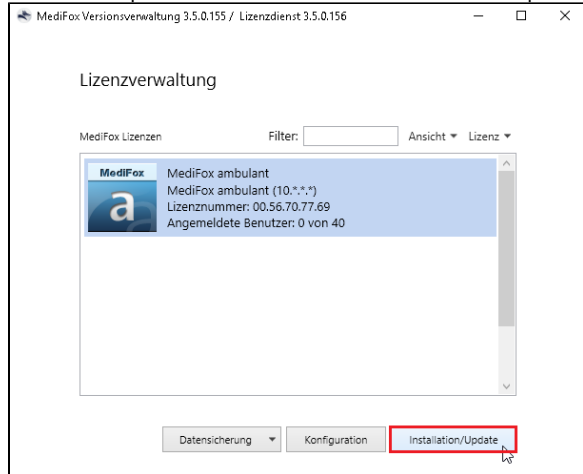


Übersicht der Lizenzen

4. Im oberen Bereich des neuen Fensters erhalten Sie die Information, dass ein Update zur Verfügung steht. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Update aktivieren“ und bestätigen Sie bitte die Abfrage zur Aktivierung mit "Ja".

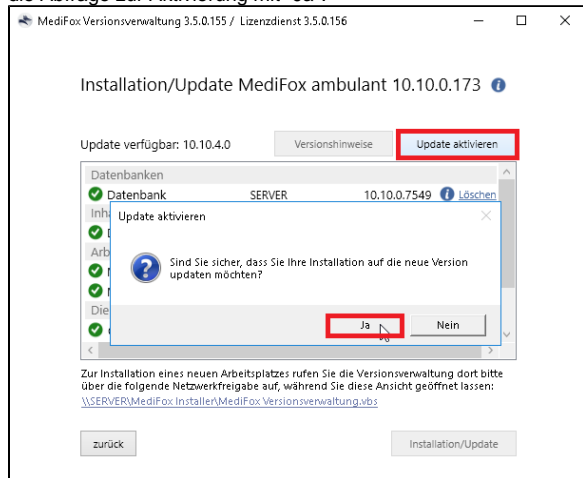

Update aktivieren

5. Führen Sie hierfür bitte den Download der zu aktualisierenden Komponente über die gleichnamige Schaltfläche aus. Nach dem Download erhalten Sie einen Sicherheitshinweis zur Datensicherung. Stellen Sie bitte unbedingt sicher, dass eine aktuelle Datensicherung vorliegt.

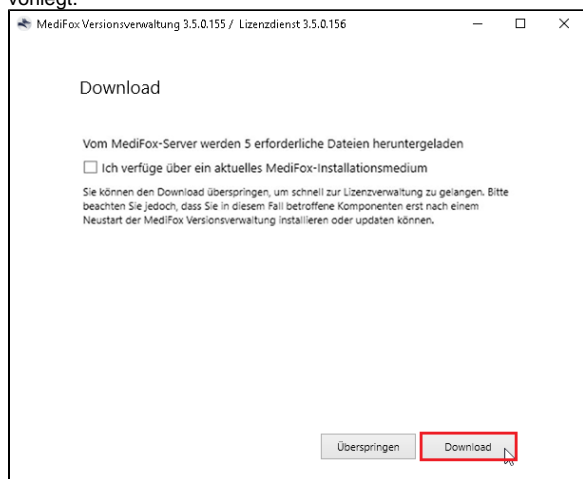


Download der Komponenten

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Benutzer benachrichtigen“, um eine Abmeldung der allgemeinen MediFox Dienste,

- ambulant-Webservice
- CarePad-Webservice
- CareNavigator-Service
- Connect
- finance-Service
- Scheduling-Service


die bei Ihnen installiert sein können, vorzunehmen. Sollten noch Mitarbeiter angemeldet sein, bekommen diese eine Benachrichtigung auf ihrem Arbeitsplatz. Im Bedarfsfall können Sie die Beendigung auch erzwingen.

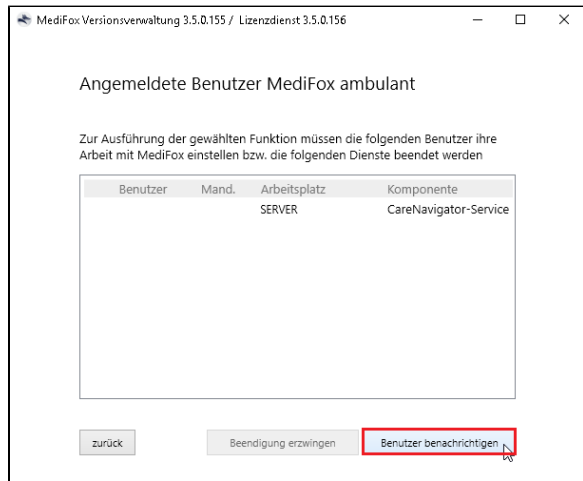

Benutzer benachrichtigen

7. Sobald alle Dienste beendet sind, bekommen Sie alle Komponenten mit einem gelben oder roten Ausrufezeichen angezeigt. Aktualisieren Sie diese nacheinander. Wählen Sie hierzu die Komponente aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Installation/Update“. Sobald die Komponente erfolgreich aktualisiert wurde, wird diese mit einem grünen Haken gekennzeichnet. Sobald alle Komponenten auf Ihrem Server einen grünen Haken erhalten haben, können Sie das Update gern auf den Arbeitsplätzen fortführen.

Achtung: Sollte sich eine Komponente auf einem anderen Server befinden, lassen Sie die Übersicht der Komponenten bitte geöffnet und rufen Sie den in der Versionsverwaltung angezeigten Pfad auf dem System auf, auf dem die Komponente aktualisiert wird. Führen Sie die Aktualisierung der Komponente nun auf dem entfernten System durch.

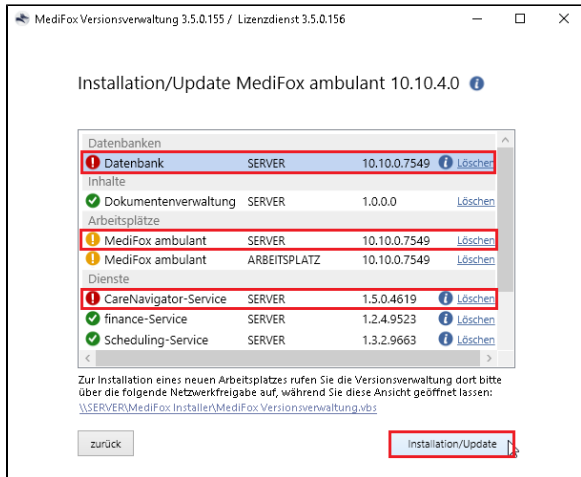

Update der Komponenten




Für die Installation an Terminalservern aktivieren Sie bitte den Installationsmodus am Server. Falls dieser nicht aktiv ist, weist die Versionsverwaltung Sie während des Installationsprozesses darauf hin. Um den Installationsmodus zu aktivieren und im Anschluss an das Update wieder deaktivieren zu können, ist die Eingabeaufforderung aus dem Startmenü Ihres Servers mit den Administratorberechtigungen notwendig.

Folgende Befehle werden hierfür benötigt:


Aktivierung Installationsmodus	change user /install
Deaktivierung Installationsmodus	change user /execute

8. Starten Sie MediFox ambulanz auf dem Arbeitsplatz und bestätigen Sie das eingeblendete Fenster mit "OK". Die Versionsverwaltung öffnet sich nach wenigen Augenblicken.

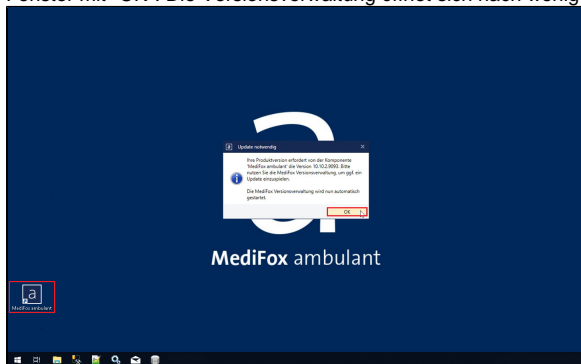

Versionsverwaltung auf dem Arbeitsplatz öffnen

9. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Update“, um MediFox ambulant auf dem Arbeitsplatz zu aktualisieren. Sobald das Update durchgeführt wurde, erhalten Sie eine Übersicht der installierten Komponente(n). Wenn die Komponente(n) erfolgreich aktualisiert wurde(n), erhalten Sie auch hier einen grünen Haken. Wiederholen Sie dies bitte an allen weiteren Arbeitsplätzen.

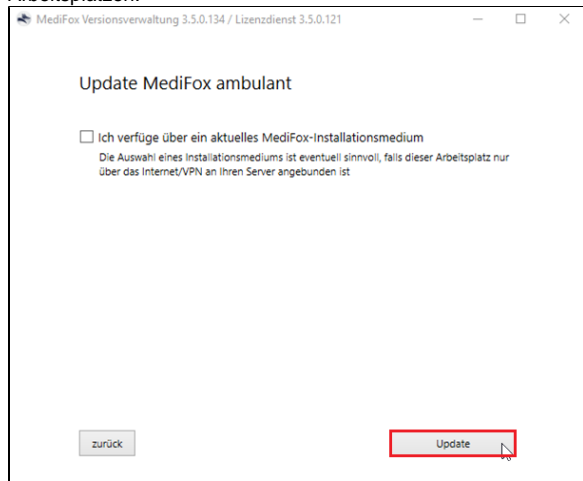

Update auf dem Arbeitsplatz



Sie haben das Update erfolgreich installiert und können, wie gewohnt mit MediFox ambulant, weiterarbeiten.

Hintergrundinfo

Dezentral beschreibt die Installationsart und bedeutet **nicht**, dass alle Komponenten auf einem System installiert sind.